

Informacije o Proizvodu

SUPREMIA 7 | 3


Bernafonova Supremia 7|3 je Super Power зауšno slušno pomagalo, pogodno za teška do duboka slušna oštećenja. Supremia predstavlja Bernafonovu zaštićenu Audio Efficiency™ tehnologiju koja uključuje značajke kao što su Speech Cue Priority™, Smanjenje

Povratnih Zvukova, i Frequency Composition™. Svi bežični uređaji, uključujući SoundGate 3, SoundGate Mic, RC-N daljinski upravljač, te mnogi drugi, također se mogu povezati sa Supremiom.

SUPER POWER SA ZAVOJNICOM



SR 7|3 SP

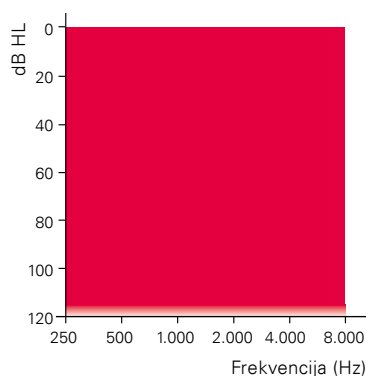

BOJE SLUŠNIH POMAGALA



MBE

metalik
bež



MAC

metalik
antracit



ANBR

antikno
brončana



MSIL

metalik
srebrna



BP

nježno
ružičasta



BB

nježno
plava

BOJA OSNOVE
ŠKOLJKE



SABE
pješčano
bež

Sva Super Power зауšna slušna pomagala dolaze s osnovom pješčano bež boje, te različitim bojama vanjske školjke.

Audio Efficiency™

Govor

- ChannelFree™
- Speech Cue Priority™
- Frequency Composition™
- True Directionality™*

Komfor

- Prilagodljivo Suzbijanje Mikrofonije Plus
- Prilagodljiva Redukcija Buke Plus
- Redukcija Prolazne Buke*
- Smanjenje Odjeka*
- Binauralna Usklađenost

Individualizacija

- Bežična Veza
- Jezični Specifični Ciljevi
- REMfit™

Dodatne Karakteristike

Tehničke Značajke

- Digitalna obrada signala do 8 kHz
- Program Više-Okruženja
- Optimizator Okruženja*
- Automatska detekcija Telefona*
- Telefonska zavojnica
- Prilagodljiva Usmjerenost
- Hidrofobni premaz
- Zaštita od prašine i vode (IP58)
- LED indikator

Značajke Personalizacije



- Učitavanje Podataka
- Pametni VC*
- 13 opcija slušnih programa
- 4 slobodna slota za upisivanje
- DAI/FM adapter
- Kontrola jačine zvuka 1 dB po koraku

* Samo za Supremia 7





SR 7|3 SP
Zavojnica

2CC SPOJNICA

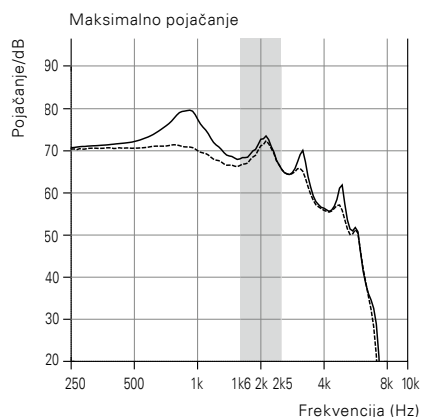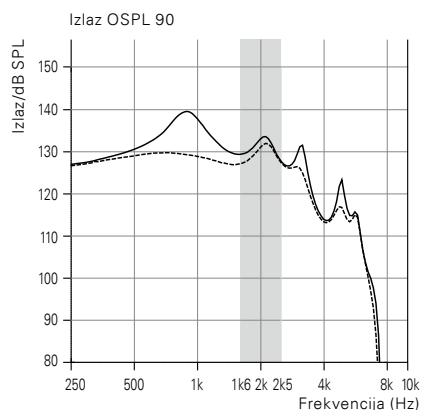

— Mjerenja sa zavojnicom bez filtera
- - - Mjerenja sa zavojnicom s filterom

SIMULATOR UHA

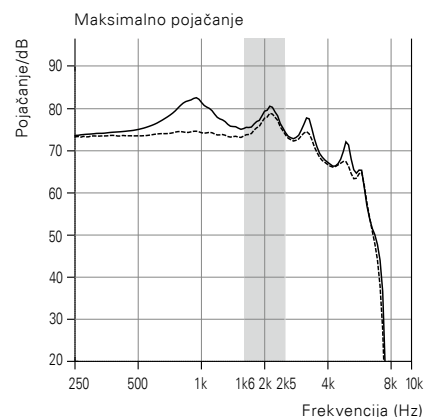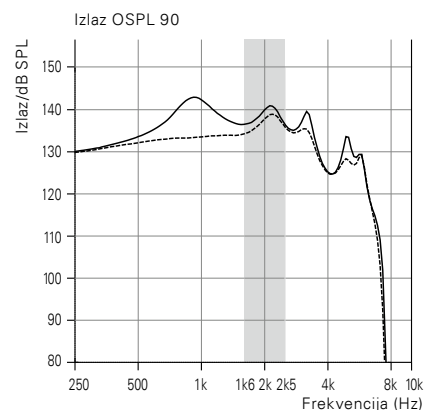

2CC SPOJNICA

	ZAVOJNICA BEZ FILTERA	ZAVOJNICA S FILTEROM
OSPL 90, pojačanje (dB SPL)	139**	132**
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	129	127
HFA OSPL 90 (dB SPL)	131	128
Maksimalno pojačanje (dB)	79	72
Maksimalno pojačanje, 1600 Hz (dB)	68	66
HFA Maksimalno pojačanje (dB)	70	67
Kontrolni test pojačanja (dB)	54	51
Struja u stanju mirovanja (mA)	1.1	1.1
Radna struja (mA)	2.0	1.7
Tip Baterije	13	
Distorzija 500/800/1600 Hz (%)	<3/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvencijski raspon (Hz)	100 – 6000	100 – 6000
Ekvivalentna ulazna buka ¹⁾ , dB(A)	16	17
Tele-zavojnica 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	98	96
Tele-zavojnica HFA SPLITS (dB SPL)	108	101
Izbornik Programa	●	
Lokalni regulator razine jačine zvuka	●	
LED Indikator	●	
Automatski Telefon, detekcija	●*	
Sustav Mikrofona	dir	

SIMULATOR UHA

	ZAVOJNICA BEZ FILTERA	ZAVOJNICA S FILTEROM
OSPL 90, pojačanje (dB SPL)	143**	139**
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	136**	134**
HFA OSPL 90 (dB SPL)	–	–
Maksimalno pojačanje (dB)	82	79
Maksimalno pojačanje, 1600 Hz (dB)	75	73
HFA Maksimalno pojačanje (dB)	–	–
Kontrolni test pojačanja (dB)	62	60
Struja u stanju mirovanja (mA)	1.1	1.1
Radna struja (mA)	1.3	1.3
Tip Baterije	13	
Distorzija 500/800/1600 Hz (%)	<9/<2/<3	<5/<4/<4
Frekvencijski raspon (Hz)	–	–
Ekvivalentna ulazna buka ¹⁾ , dB(A)	18	17
Tele-zavojnica 1 mA/m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	105	103
Tele-zavojnica HFA SPLITS (dB SPL)	–	–
Izbornik Programa	●	
Lokalni regulator razine jačine zvuka	●	
LED Indikator	●	
Automatski Telefon, detekcija	●*	
Sustav Mikrofona	dir	

¹⁾ Tehnički podaci mjereni s ekspanzijom, odgovarajući podešavanjima mjerenja pribora za ispitivanje.

"2cc" se odnosi na spojnicu prema IEC 60318-5:2006. "Simulator uha" se odnosi na spojnicu prema IEC 60318-4:2010.

Primijenjene verzije: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7:2005, ANSI S3.22:2009.

* Samo za Supremia 7

** Posebnu pažnju treba obratiti tijekom podešavanja i korištenja slušnog pomagala s maksimalnom mogućnošću zvučnog tlaka koji prelazi 132 dB SPL (IEC 60318-4), pošto postoji rizik od oštećenja preostalog sluha korisnika slušnog pomagala.

	SUPREMIA 7	SUPREMIA 3
OBRADA SIGNALA		
ChannelFree™	●	●
Speech Cue Priority™	●	●
Frequency Composition™	●***	●
Frekvencijski Raspon	8 kHz	8 kHz
SLUŠNI KOMFOR		
Prilagodljiva Redukcija Buke Plus (ANR Plus)	5 ctr	4 ctr
ANR Plus Ultra Komfor	●	–
Redukcija Prolazne Buke	●	–
Prilagodljivo Suzbijanje Mikrofonije Plus	●	●
Upravljanje Bukom Vjetra	●	●
Optimizator Okruženja	1/4	–
Napredno Upravljanje Mekom Bukom	3 ctr	2 ctr
Redukcija Povratnih Zvukova	●	–
BINAURALNA SINKRONIZACIJA		
Potpuno utišavanje, Promjene Programa	●	●
Klasifikacija Okruženja	●	–
Prigušenje na Ne-Telefonskom Uhu	●	–
KONTROLE USMJERENOSTI		
Prilagodljiva Usmjerenost	●	●
True Directionality™ (Prava Usmjerenost)	●	–
PRAKTIČNE ZNAČAJKE		
VC Klik	●	●
Potpuno Utišavanje Preko Gumba	●	●
Podesiv Start i Odgadanje	●	●
Kontrola jačine zvuka 1 dB po koraku	●	●
LED Status Indikator	●	●
OSOBNOST		
Programske Opcije/Memorije	13/4	11/4
Prilagodljivo Upravljanje	●	–
Učitavanje Podataka	●	●
Pametan VC	●	–
Jezični Specifični Ciljevi	●	●
REMfit™	●	●
Interakcija s Klijentom	●	●
BEŽIČNI / DODACI (DODATNO)		
Daljinski Upravljač RC-N	●	●
SoundGate 3 (Bluetooth®)	●	●
SoundGate Mic (sa SoundGate 3)	●	●
TV/Telefonski adapter 2	●	●
FM adapter	●	●
DAI adapter	●	●
CROS Mikrofon	●	●

*** Supremia 7 omogućava dodatna frekvencijska područja (1,0 – 2,9 kHz)

OPREMA ZA PROGRAMIRANJE



Supremia 7|3 Super Power je programirana s Bernafonovim Oasis programom, verzijom 21.0 ili novijom, NOAH kompatibilnim MS-Windows® programom za podešavanje preko PC-a. Potrebno je NOAH FittingLINK, HI-PRO, HI-PRO USB, HI-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSlink³ ili nEARcom programsko sučelje. Samostalno instaliranje Oasis programa je također moguće.

Operativni sustav


Windows® 8.1, 32/64 bita, sve verzije
Windows® 8, 32/64 bita, sve verzije
Windows® 7, 32/64 bita, sve verzije
Windows® Vista, 32/64 bita, sve verzije
Windows® XP SP3

Noah

Noah 4 (sve verzije)
Noah 4.3 (minimum za Windows® 8)
Sve verzije Noah 3 (nije preporučljivo)

PROIZVOD	OPIS	BROJ DIJELA	
Prog. kabel, Br. 2 Novi standardni (HI-PRO)	Plavi, lijevo	384-20-033-00	
Prog. kabel, Br. 2 Novi standardni (HI-PRO)	Crveni, desno	384-20-032-00	
Prog. kabel, Br. 2 Novi standardni (NOAHlink)	Plavi, lijevo	384-20-035-00	
Prog. kabel, Br. 2 Novi standardni (NOAHlink)	Crveni, desno	384-20-034-00	
FittingLINK	Bežični uređaj za programiranje namijenjen direktnom programiranju slušnog pomagala preko PC-a. Potreban je dodijeljen USB Bluetooth® uređaj (uključen u pakiranje).	144720	

DODACI

PROIZVOD	OPIS	BROJ DIJELA	
Daljinski upravljač RC-N	Diskretan uređaj za reguliranje jačine zvuka i programa	139772	
SoundGate 3 (Bluetooth®)	Sučelje za bežičnu komunikaciju, daljinski upravljač. S telefonskom zavojnicom.	144604	
SoundGate Mic	Mikrofon s kopčom koji povećava razumijevanje govora izabranog govornika (zahtijeva SG3)	145645	
TV Adapter 2 (Bluetooth®)	Sučelje za bežičnu komunikaciju, daljinski upravljač. S telefonskom zavojnicom.	127847	
Telefonski Adapter 2 (Bluetooth®)	Omogućava bežični prijem poziva fiksne telefonije	124396 (EU), 130976 (JP), 130977 (KR), 130978 (NZ), 130979 (US), 130980 (ZA), 130981 (AU), 130982 (BR), 130983 (CN), 131571 (RU)	
DAI adapter	SBO Proizvod	147602	
FM adapter	SBO Proizvod	147435	
Adapter za Programiranje		399-50-640-00	
CROS Mikrofon	SBO Proizvod	153877	

Proizvođač

Švicarska
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Generalni zastupnik

za Hrvatsku
Elton
Kneza Ljudevita Posavskog 35
10000 Zagreb
Tel. +385 1 464 72 13
Fax +385 1 464 72 14
www.bernafon.hr